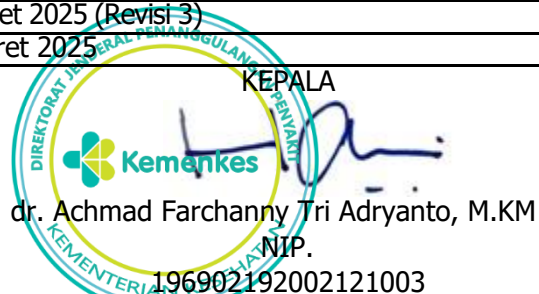


KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2P  BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	NOMOR SOP	: OT.02.02/2.1/2788/2020
	TGL. PEMBUATAN	: 17 Juli 2020
	TGL. REVISI	: 14 Maret 2025 (Revisi 3)
	TANGGAL EFEKTIF	: 14 Maret 2025
	DISAHKAN OLEH	
TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG, KEGAWATDARURATAN DAN SITUASI KHUSUS	NAMA SOP	PEMAKAIAN AED
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes RI No.10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 3. IHR Tahun 2005	1. Fungsional Dokter 2. Fungsional Perawat	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
SOP Evakuasi dan Rujukan	1. AED 2. PAD AED (Bantalan) 3. ATK 4. ALAT DIAGNOSTIK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Tidak terlaksananya SOP berakibat pelayanan terganggu	Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy	

PROSEDUR PEMAKAIAN AED

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Dokter Fungsional	Perawat Fungsional	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	
1	Melakukan pencatatan pasien yang datang ke klinik			ATK	2	Data umum pada registrasi	
2	- Melakukan cuci tangan dan menggunakan Sarung tangan - Melakukan pemeriksaan pada pasien henti nafas dan henti jantung. - Jika henti nafas dan henti jantung lakukan Resusitasi jantung paru sambill disiapkan AED			ALAT DIAGNOSTIK (Stetoskop, Pulseoksimeter, Senter dll)	2	Data hasil pemeriksaan Pernafasan dan Jantung	
3	Setelah mendapatkan AED: - Buka penutup AED - Buka pakaian dari dada pasien dan pastikan agar bagian kulit bersih dan kering serta cukur rambut yang berlebihan jika perlu - Robek paket PAD untuk membukanya dan keluarkan PAD - Lepaskan pelapis plastik PAD dan tempelkan pada dada sesuai pada gambar pada PAD - Sambungkan kabel PAD ke AED dan Tekan Tombol Power ON			PAD AED	2	PAD Terpasang pada AED	
4	- Setelah AED Posisi ON, Ikuti pesan suara dan teks sebagai pedoman dalam memberikan bantuan pertolongan. - Jika pesan suara AED: "DO NOT TOUCH PATIENT! ANALYZING RHYTHM." (JANGAN SENTUH PASIEN! SEDANG MENGANALISA RITME) - Jika ada pesan Petunjuk melakukan Shock, maka: "SHOCK ADVISED CHARGING." (KEJUTAN YANG DIANJURKAN SEDANG DIISI) "CHARGING" (PENGISIAN) "STAND CLEAR! PUSH FLASHING BUTTON TO DELIVER SHOCK." (JANGAN ADA YANG MENYENTUH			Alat AED	30	Mengikuti perintah AED	

	PASIEN DENGAN MENGUCAPKAN I AM CLEAR, YOU CLEAR, EVERY BODY CLEAR! Kemudian TEKAN TOMBOL BERKELIP UNTUK MEMBERIKAN KEJUTAN) 4. Jika ritme pasien berubah menjadi ritme yang tidak dapat dikejutkan sebelum kejutan diberikan, AED akan memberi tahu bahwa ritme telah berubah dan memberikan pesan "RHYTHM CHANGED, SHOCK CANCELLED." (RITME BERUBAH, KEJUTAN DIBATALKAN) 5. AED akan membatalkan isian dan meminta pemakai untuk memulai atau melanjutkan CPR mengikuti irama yang dikeluarkan AED 6. Di akhir waktu CPR, pesan suara akan mengarahkan Anda untuk mengulangi langkah 2 dan 3 jika perlu 7. Jika tindakan sudah selesai dilakukan, posisikan korban dalam posisi stabil atau recovery position dan persiapkan untuk rujukan						
5	Persiapkan pasien untuk di rujuk ke RS Rujukan, buat Sistrute Rujukan			Ambulans, PC/ Laptop, Jaringan Internet	15	Terlaksana Rujukan	
6	Melakukan pencatatan dan pelaporan			ATK, PC/Laptop, jaringan Internet, Rekam medis/buku register	5	Laporan Pelayanan Klinik	

Keterangan FLOWCHART



: Mulai dan akhir proses kegiatan berupa proses



: Kegiatan berupa proses



: Mengambil keputusan dengan opsi